biotime

Методическое пособие

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АНАЛИЗАТОРА СОСТОЯНИЯ КОЖИ



biotime

Дорогие коллеги!

Работа косметолога с пациентом всегда начинается с оценки состояния его общего здоровья, состояния кожи и выявления скрытых проблем.
От правильности проведения данного этапа зависят все дальнейшие действия и, конечно, результат.

Чтобы помочь вам качественно провести первичный сбор информации мы предлагаем вам современный эффективный инструмент косметолога в постановке диагноза пациенту, выборе процедуры и назначении домашнего ухода - анализатор состояния кожи Biotime.



Преимущества

- Позволяет объективно выполнять анализ различных показателей кожи и состояния волос (содержание воды, секрецию кожного сала, равномерность распределения пигмента, состояние пор и волосяных фолликулов).
- Действует неинвазивно, абсолютно безопасный и безболезненный для пациента
- Позволяет подобрать наиболее эффективную систему домашнего ухода
- Дает возможность показать пациенту результат уже после 1-й процедуры, когда невооруженным глазом он еще не виден
- Гарантия на устройство 1 год

Мы непрерывно стремимся улучшать комфорт и качество работ косметологов и для вас разработали методическое пособие по интерпретации показателей анализатора состояния кожи Biotime, которое облегчит подбор персональной программы ведения и поддержки пациента.

Ваш Biotime

Тип кожи: сухая
Уровень увлажненности: выше 15

ПРОЕКЦИЯ 1

Ровная блестящая кожа, без проявлений шелушения и гиперемии.




ПРОЕКЦИЯ 2

Визуализируются единичные сосуды, цвет кожи равномерный.



ПРОЕКЦИЯ 3

Визуализируются единичные сухие комедоны (подсвечиваются тусклым белым). Поверхность кожи равномерно окрашена.

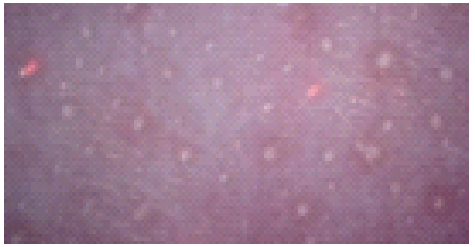

Рекомендации

Проблема	Очищение	Тонизация	Интенсивный уход	Крем	SPF	Домашний пилинг	Всесезонный пилинг
Сухая	MP/AO	MP/AO	MP/AO	MP ❄ L/AO ☼	50	PROBIO SOFT	PROBIO PEEL
Сухая усталая	MP/AO	MP/AO	AO	MP ❄ L/AO ☼	50	PROBIO SOFT	PROBIO PEEL + CARBOXY


MP – MULTI-PEPTIDE LINE
AO – ANTIOXIDANT LINE
L – LAMELLAR
W – WHITE LINE
RSL – RED STOP LINE

❄ зима ☼ лето

Тип кожи: сухая
Уровень увлажненности: ниже 15


ПРОЕКЦИЯ 1

Визуализируются разрозненные роговые чешуйки. Гиперемированная кожа между островками чешуек.

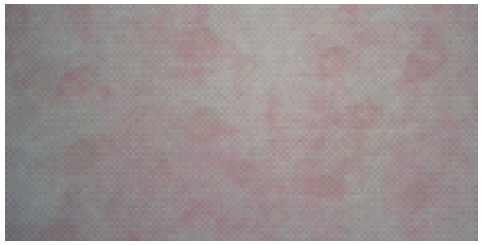


ПРОЕКЦИЯ 2

Множественные сосуды с гиперемированной зоной вокруг сосуда. Общая цветность кожи красная

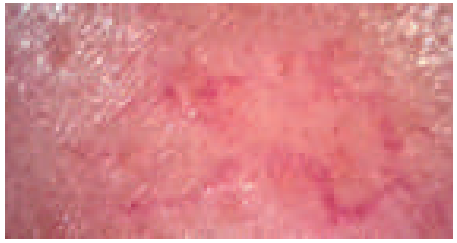

ПРОЕКЦИЯ 3

В зоны расширенных сосудов цвет кожи темнее, что свидетельствует об истончении эпидермиса и ТЭПВ. Что накладывает ограничения на кератолитические процедуры.

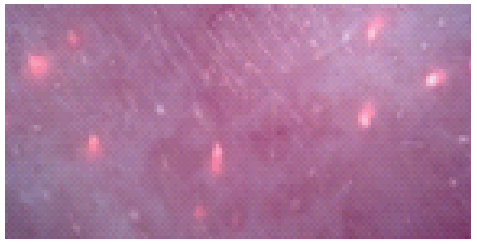

Рекомендации

Проблема	Очищение	Тонизация	Интенсивный уход	Крем	SPF	Домашний пилинг	Всесезонный пилинг
Сухая чувствительная	RSL	MP	RSL	MP ❄ L ☼	50	AZELAIC SOFT	AZELAIC PEEL
Сухая купероз.	RSL	RSL/MP	RSL	MP ❄ L/AO ☼	50	-	AZELAIC PEEL


MP – MULTI-PEPTIDE LINE
AO – ANTIOXIDANT LINE
L – LAMELLAR
W – WHITE LINE
RSL – RED STOP LINE


❄ зима ☼ лето

Тип кожи: сухая кожа с гиперпигментацией

Визуализация гиперпигментации под любым видом излучения анализатора свидетельствует о дермальном залегании пигмента. Отсутствие усиленного сосудистого рисунка говорит об отсутствии вовлеченности сосудов в процесс образования пигмента в дерме.



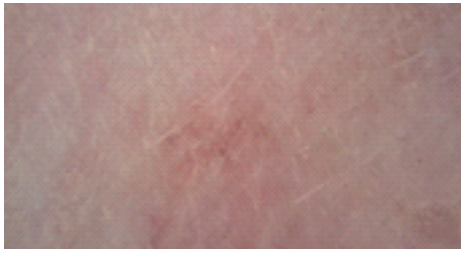

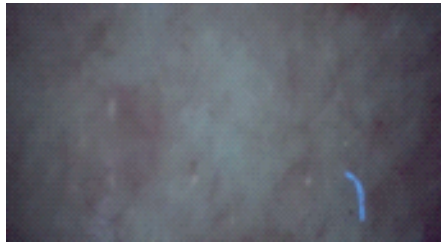

Рекомендации

Проблема	Очищение	Тонизация	Интенсивный уход	Крем	SPF	Домашний пилинг	Всесезонный пилинг
Сухая пигмент.	MP/AO	W/AO	W	MP ❄ W ☼	50	PROBIO SOFT	AZELAIC + CARBOXY

MP – MULTI-PEPTIDE LINE
AO – ANTIOXIDANT LINE
L – LAMELLAR
W – WHITE LINE
RSL – RED STOP LINE

❄ зима ☼ лето

Тип кожи: комбинированная
Уровень увлажненности: на скулах и щеках ниже 15

biotime

ПРОЕКЦИЯ 1

Визуализируются разрозненные роговые чешуйки.

ПРОЕКЦИЯ 2

Визуализируются сосуды, роговые чешуйки и визуализируются расширенные поры.

ПРОЕКЦИЯ 3

Визуализируются расширенные поры, заполненные как кожным салом, так и роговыми чешуйками.

Визуализация зависит от участка кожи.
В «Т» зоне визуал будет как для жирной обезвоженной кожи,
на скулах будет характерный для сухой чувствительной кожи

Рекомендации

Проблема	Очищение	Тонизация	Интенсивный уход	Крем	SPF	Домашний пилинг	Всесезонный пилинг
Комбинир. обезвож.	MP/AO	MP/AO	MP/R.SPRAY	MP ❄ L/AO ☼	30	PROBIO SOFT	AZELAIC + CARBOXY
Комбинир. купероз.	W	W	RSL/W	L/AO	30	AZELAIC SOFT	AZELAIC + CARBOXY

MP – MULTI-PEPTIDE LINE
RSL – RED STOP LINE
AO – ANTIOXIDANT LINE
W – WHITE LINE
L – LAMELLAR

❄ зима ☼ лето

Тип кожи: комбинированная
Уровень увлажненности: на скулах и щеках выше 15

biotime

ПРОЕКЦИЯ 1

На «Т»-зоне блестящая кожа, с расширенными порами. На скулах и щеках ровная блестящая кожа, без проявлений шелушения

ПРОЕКЦИЯ 2

Блестящая кожа с единичными сосудами, визуализируются расширенные поры. Цветность кожи равномерная.

ПРОЕКЦИЯ 3

Визуализируются расширенные поры, заполненные как кожным салом, так и роговыми чешуйками.

Визуализация зависит от участка кожи.
В «Т» зоне визуал будет как для жирной кожи,
на скулах будет характерный для сухой кожи

Рекомендации


Проблема	Очищение	Тонизация	Интенсивный уход	Крем	SPF	Домашний пилинг	Всесезонный пилинг
Комбинированная	W/AO	AO/AA	MP/AO	L/AO	30	AZELAIC SOFT	AZELAIC PEEL
Комбинир. пористая	CG/W	AA/YS	AA/AO/W	L/AA	30	ANTI-ACNE SOFT	AZELAIC PELL

MP – MULTI-PEPTIDE
RSL – RED STOP LINE
AO – ANTIOXIDANT
W – WHITE
L – LAMELLAR
AA – ANTI-ACNE
CG – CLEANSING GEL
YS – YOUNG SKIN

Тип кожи: жирная
Уровень увлажненности: от 15 до 20

ПРОЕКЦИЯ 1

Блестящая кожа с расширенными порами. Поры с содержимым.

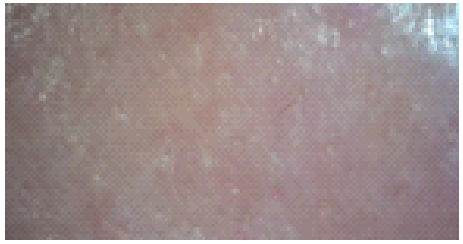


ПРОЕКЦИЯ 2

Блестящая кожа с единичными сосудами, визуализируются расширенные поры. Цветность кожи равномерная.



ПРОЕКЦИЯ 3

Визуализируются расширенные поры, заполненные как кожным салом так и роговыми чешуйками

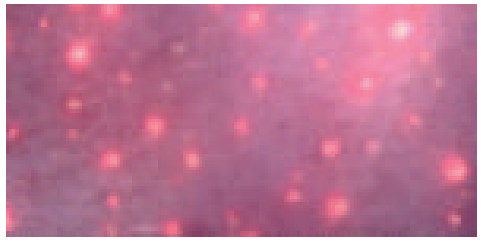

Рекомендации


Проблема	Очищение	Тонизация	Интенсивный уход	Крем	SPF	Домашний пилинг	Всесезонный пилинг
Жирная	YS/AO	AO/AA	MP/AO	L/AO	30	ANTI-ACNE SOFT	AZELAIC PEEL
Жирная комедональная	CG/YS	AA/YS	AA	L/AA	30	ANTI-ACNE SOFT	AZELAIC PELL
Жирная пустулезная	AA	AA	AA	AA	30	-	SALICYLIC PEEL

MP – MULTI-PEPTIDE
RSL – RED STOP LINE
AO – ANTIOXIDANT
W – WHITE
L – LAMELLAR
AA – ANTI-ACNE
CG – CLEANSING GEL
YS – YOUNG SKIN

Тип кожи: жирная
Уровень увлажненности: выше 20


ПРОЕКЦИЯ 1

Блестящая кожа с расширенными порами. Поры с содержимым.

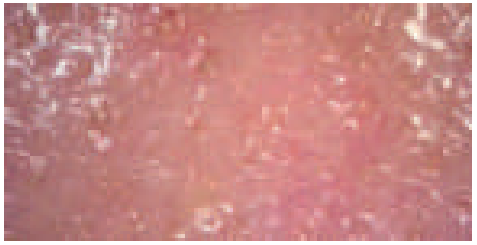


ПРОЕКЦИЯ 2

Блестящая кожа с единичными сосудами, визуализируются расширенные поры. Цветность кожи равномерная.

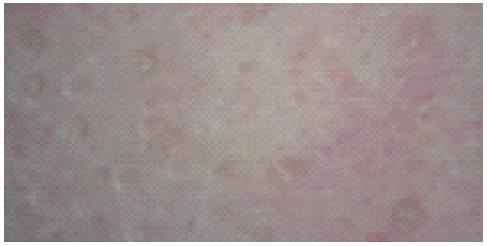

ПРОЕКЦИЯ 3

Визуализируются множественные расширенные поры, заполненные кожным салом (светятся алым). Поверхность кожи равномерно окрашена.

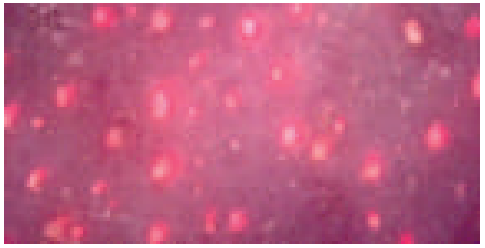

Рекомендации

Проблема	Очищение	Тонизация	Интенсивный уход	Крем	SPF	Домашний пилинг	Всесезонный пилинг
Жирная	YS/AO	AO/AA	MP/AO	L/AO	30	ANTI-ACNE SOFT	AZELAIC PEEL
Жирная комедональная	CG/YS	AA/YS	AA	L/AA	30	ANTI-ACNE SOFT	AZELAIC PELL
Жирная пустулезная	AA	AA	AA	AA	30	-	SALICYLIC PEEL


MP – MULTI-PEPTIDE
RSL – RED STOP LINE
AO – ANTIOXIDANT
W – WHITE
L – LAMELLAR
AA – ANTI-ACNE
CG – CLEANSING GEL
YS – YOUNG SKIN

Тип кожи: жирная
Уровень увлажненности: ниже 15

biotime


ПРОЕКЦИЯ 1

Визуализируются множественные очаги разрозненных роговых чешуек. Гиперемированная кожа между островками чешуек.

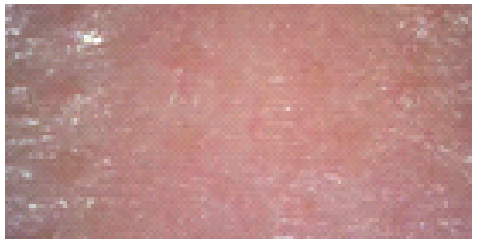


ПРОЕКЦИЯ 2

Множественные сосуды, роговые чешуйки и очаги атрофии эпидермиса

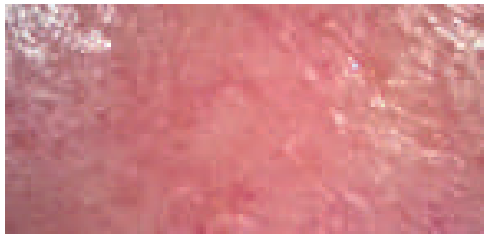

ПРОЕКЦИЯ 3

Наряду с расширенными порами, участки атрофии эпидермиса выделяются более темным цветом. Если границы атрофических изменений ровные, это говорит о застарелых экскориациях. Что накладывает ограничения на кератолитические процедуры.

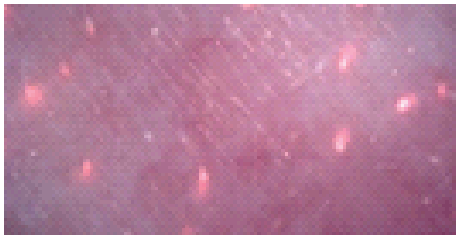

Рекомендации


Проблема	Очищение	Тонизация	Интенсивный уход	Крем	SPF	Домашний пилинг	Всесезонный пилинг
Жирная обезвоженная	MP/AO	YS	MP/R.SPRAY	MP ❄ L/AO ☼	30	PROBIO SOFT	AZELAIC + CARBOXY
Жирная купероз	MP/AO	MP/AO	RSL/LS/AO	L/AA	30	PROBIO SOFT	

MP – MULTI-PEPTIDE LINE
AO – ANTIOXIDANT LINE
L – LAMELLAR
W – WHITE LINE
RSL – RED STOP LINE
LS - LYMPHATIC DRAINAGE SERUM


❄ зима ☼ лето

Тип кожи: жирная кожа с гиперпигментацией

Визуализация гиперпигментации под любым видом излучения анализатора свидетельствует о дермальном залегании пигмента. Отсутствие усиленного сосудистого рисунка говорит об отсутствии вовлеченности сосудов в процесс образования пигмента в дерме.

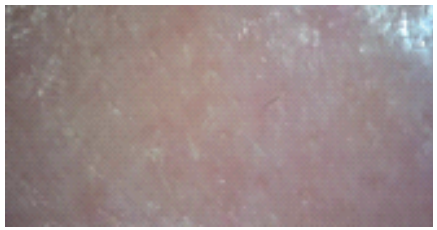



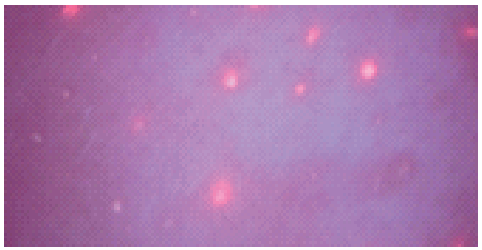

Рекомендации

Проблема	Очищение	Тонизация	Интенсивный уход	Крем	SPF	Домашний пилинг	Всесезонный пилинг
Жирная пигмент.	W/AO	W/AO	❄W ☼AO	❄W ☼AO	30	-	-

MP – MULTI-PEPTIDE LINE
AO – ANTIOXIDANT LINE

L – LAMELLAR
W – WHITE LINE

RSL – RED STOP LINE

❄ зима ☼ лето